

FECHA: Agosto 2024

Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo


Colocacion abanico en la habitacion del personal del area de laboratorio



Administracion de gas a la nevera de la cocina



Instalacion de equipo de computadora area de direccion

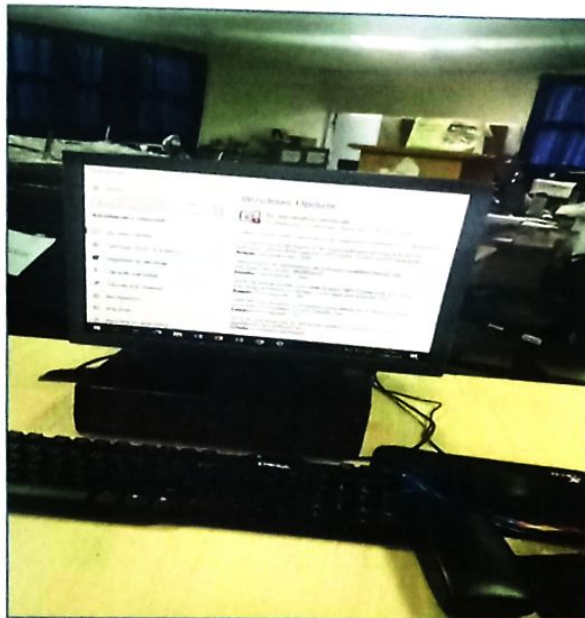



Instalacion del autoclave, area de esterilizacion



Calendario cloracion agua cisterna

21/01/24	11:20	Clor plombo	mat
12/02/24	11:20	Clor plombo	mat
19/03/24	11:20	Clor plombo	mat
26/04/24	11:20	Clor plombo	mat

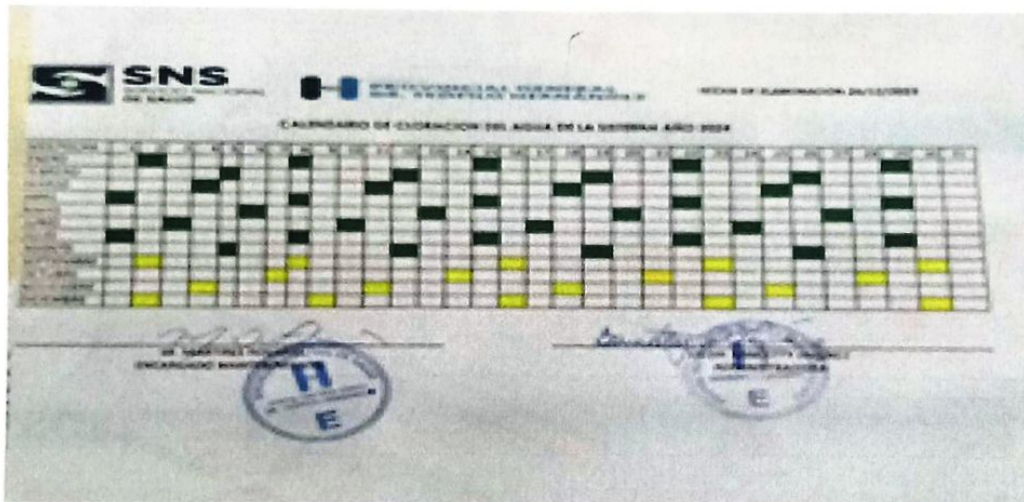

Bancetty Q. Jimenez

Licda. Bancetty Jimenez
Administradora



Sr. Martires Rosario
Encargado Mantenimiento



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD



HOSPITAL
PROVINCIAL GENERAL
DR. TEÓFILO HERNÁNDEZ

FECHA DE ELABORACION 26/12/2023

CALENDARIO DE CLORACION DEL AGUA DE LA SISTERNA AÑO 2024

MES/FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ENERO		■						■							■							■										
FEBRERO					■							■							■							■						
MARZO				■								■								■							■					
ABRIL	■								■														■									
MAYO						■							■								■							■				
JUNIO			■								■													■								
JULIO	■														■									■								
AGOSTO						■							■														■					
SEPTIEMBRE		■															■							■								
OCTUBRE								■						■															■			
NOVIEMBRE				■								■																				
DICIEMBRE		■														■																

M. Rosario
SR. MARTIRES ROSARIO
ENCARGADO MANTENIMIENTO



Bancetty
LICDA. BANCETTY JIMENEZ
ADMINISTRADORA



MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2024


Instalación / Maquinaria	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
Abanico de pared	Aire acondicionado dañado	Instalacion de abanico del personal del area de laboratorio	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24											X							
Nevera	Maquinaria	Administracion de gas a la nevera de la cocina	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24											X							
Equipo de computadora	x	Instalacion de equipo de computadora area de direccion	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24											X							
Equipo de autoclave	x	Instalacion del autoclave, area de esterilizacion	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24											X							
Cisterna	Agua	Cloracion del agua	Preventivo	Semanal	ago-24	sep-24											X							
EM-134 Mesa para cirugia general	Maquinaria	Se le cambio el transformador porque la tarjeta presento fallo y se le retira el modulo completo	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24											X							
EM-129 Maquina de anestesia con sistema de monitoreo completo	Maquinaria	Revison de funcionamiento, revison de fugas, revison de sistema neumatico y filtros.	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24											X							Funcionando con limitaciones problema con el servofreno
EM-144 Monitor de gases anestésicos, B Q quirofanos zona D2	Maquinaria	Limpieza y mantenimiento en general, pruebas de sensores, chequeo del funcionamiento de electrodos y cables de conexión	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24											X							
EM-134 Mesa para cirugia general, B Q quirofanos zona D2	Maquinaria	Revison y ajuste del sistema hidraulico, revison de controles, engrase y lubricacion de partes mecanicas, mantenimiento en general	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24											X							Funcionando correctamente
EM-148 Monitor de signos vitales avanzado, BQ Quirofanos zona 2	Maquinaria	Revison de circuitos internos, ajuste de configuraciones, revison de cables de parametros, prueba de funcionamiento, revison de bateria	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24											X							Funcionando correctamente
EM-016 Aspirador portatil, BQ quirofanos zona D2	Maquinaria	Prueba de funcionamiento, revison de filtro de control de humedad, limpieza general, revison de manguera	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24											X							Funcionando correctamente
EM-146 Monitor de signos vitales basico fijo, BQ Post quirurgico mo 1	Maquinaria	Revison de circuitos internos, ajuste de configuraciones, revison de cables de parametros, pruebas de funcionamiento correcto, revison de bateria, limpieza en general	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24											X							C321010118, presenta rayas en la pantalla (lineas vertical y horizontal)

EM-146 Monitor de signos vitales basico fijo, BQ Post quirurgico no. 2	Maquinaria	Revison de circuitos internos, ajuste de configuraciones, revision de cables de parametros, pruebas de funcionamiento correcto, revision de bateria, limpieza en general	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24													X																				
EM-150 Nebulizador adulto pediatrico grado hospitalario, B Q/E de enf. Internamiento	Maquinaria	Revison y chequeo de funcionamiento electrico, revision del funcionamiento de mascarilla	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24													X																				
EM-066 Electrocardiografo 12 derivaciones con carro de transporte, B Q/E de enf. Internamiento	Maquinaria	Revison y chequeo de cable de paciente, ajuste de configuraciones, ajuste de tornillos y pieza del equipo, revision de printer y bateria	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24													X																				
EM-202 Torre Laparoscopia, B Q quirofanos zona D 2	Maquinaria	Revison de funcionamiento, revision de bombilla, limpieza de ventiladores, configuracion y calibracion del sistema, mantenimiento en general	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24													X																				
EM-134 Mesa para cirugia general, B Q quirofanos zona D1	Maquinaria	Revison y ajuste del sistema hidraulico, revision de controles, engrase y lubricacion de partes mecanicas, mantenimiento en general	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24													X																				
EM-058 desfibrilador bifasico, B Q/E de enf. Internamiento	Maquinaria	Limpieza y mantenimiento en general, ajuste de configuracion electricos, revision de circuito, chequeo del funcionamiento de paletas y cables de conexión	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24													X																				
EM-147 monitor de signos vitales basicos portatil, BQ/E de enf. Internamiento	Maquinaria	Revison de circuitos internos, ajuste de configuraciones, revision de cables de parametros, pruebas de funcionamiento correcto, revision de bateria, limpieza en general	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24													X																				
EM-183 Rayos X portatil, B Q/E de enf. Internamiento	Maquinaria	Revison de funcionamiento, ajuste y configuracion del sistema computarizado, chequeo de partes moviles y carro de transporte, revision de las placas de radiografia, pruebas de funcionamiento general	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24													X																				
EM-016 Aspirador portatil, B Q/E de enf. internamiento	Maquinaria	Prueba de funcionamiento, revision de filtro de control de humedad, limpieza general, revision de manguera	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24													X																			Funcionando correctamente	
EM-016 Aspirador portatil, BQ/ quirofanos zona D 1	Maquinaria	Prueba de funcionamiento, revision de filtro de control de humedad, limpieza general, revision de manguera	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24													X																				



EM-058 Desfibrilador bifasico, Emergencia/trauma shock	Maquinaria	Limpieza y mantenimiento en general, ajuste de configuraciones, revision de circuitos electricos, chequeo del funcionamiento de paletas y cables de conexion	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24															X																
EM-183 Rayos X portatil, emergencia trauma shock	Maquinaria	Revision de funcionamiento, ajuste y configuracion del sistema computarizado, chequeo de partes moviles y carro de transporte, revision de las placas de radiografia, pruebas de funcionamiento general	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24																X															
EM-205 ventilador adulto- pediatrico, emergencia/trauma shock	Maquinaria	Revision y ajuste de blender, de turbina, de bateria, de sistema de oxigeno, de sistema de flujo, de ventilacion interna., limpieza y mnatenimiento en general, revision y ajuste de cambio de filtro de aire	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24																X															
EM-207 ventilador de transporte, emergencia/trauma shock	Maquinaria	Revision y ajuste de blender, de turbina, de bateria, de sistema de oxigeno, de sistema de flujo, de ventilacion interna., limpieza y mnatenimiento en general, revision y ajuste de cambio de filtro de aire	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24																X															
EM-191 Sonografo de emergencia, emergencia/trauma shock	Maquinaria	Prueba de funcionamiento, revision de transductores, revision de filtro, limpieza y mantenimiento	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24																X															
EM-066 Electrocardiografo 12 derivaciones con carro de transporte, Emergencia/trauma shock	Maquinaria	Revision y chequeo de cable de paciente, ajuste de configuraciones, ajuste de tornillos y piezas del equipo, revision del printer y bateria	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24																X															
EM-134 Mesa para cirugia general, B Q /quirofano zona D 2	Maquinaria	Revision y ajuste del sistema hidraulico, revision de controles, engrase y lubricacion de partes mecanicas, mantenimiento en general	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24																X															
EM-058 desfibrilador bifasico, B Q/quirofano zona D1	Maquinaria	Limpieza y mantenimiento en general, ajustes de configuraciones, revision de circuitos electricos, chequeo del funcionamiento de paletas y cables de conexion	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24																X															



EIM-147 monitor de signos vitales basico portátil, emergencia/traje	Maquinaria	Revisión de circuitos internos, ajustes de configuraciones, revisión de cables de parámetros, pruebas de funcionamiento correcto, revisión de batería, limpieza general	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24			X				
EIM-Monitor de signos vitales fijo, Emergencia/ambu Goniatología	Maquinaria	Revisión de circuitos internos, ajustes de configuraciones, revisión de cables de parámetros, pruebas de funcionamiento correcto, revisión de batería, limpieza general	Preventivo	Mensual	ago-24	sep-24			X				

Beccathy Jiménez
 Beccathy Jiménez
 Administradora





Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Nº.: 3029

DATOS GENERALES

LUGAR DE VISITA HOSPITAL DR TEOFILO HERNANDEZ		EQUIPO EM-134 MESA PARA CIRUGÍA GENERAL	
UBICACION	ESTE	CODIGO	560
PROVINCIA	EL SEIBO	MARCA	SAIKANG
FECHA DE VISITA	23/08/2024	MODELO	A202
AREA DE TRABAJO		SERIAL	
NOTIFICACION VIA	Whastapp		
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Funcionando con Limitaciones			

DIAGNOSTICO INICIAL

TRABAJOS REALIZADOS

Se procedió a cambio de transformador por lo
la tarjeta presenta fallo.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

Se procede a Retirar el modulo completo.

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Juan Carlos Encarnación
CÉDULA: 001-1254363-2
FIRMA: *Juan C. E.*
SELLO:

Cliente:

NOMBRE: *[Firma]*
CÉDULA:
FIRMA:
SELLO



Para más información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net



Group Z Healthcare Products Dominicana
Departamento de Biomedica



Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 3011

DATOS GENERALES

INSTITUCION HOSPITAL DR TEOFILO HERNANDEZ		EQUIPO EM-129 MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO	
UBICACION	ESTE	CODIGO	1,243
PROVINCIA	EL SEIBO	MARCA	NORTHERN
FECHA DE VISITA	08/08/2024	MODELO	ATLAS N3
UBICACION DEL EQUIPO	B. Q. / QUIROFANOS ZONA D (2)	SERIAL	SN: MZ2022041802 MONITOR DE PX1: JH20220314002 ISA AX+1: SA00000351 VAPORIZADOR DE GASES SEVOFLURANO: 12041123030155 VAPORIZADOR DE GASES ISOFLURANO: 12021123020201
NOTIFICACION VIA	Whastapp		
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: mp			

DIAGNOSTICO INICIAL

Mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS

REVISION DE FUNCIONAMIENTO	-
REVISIÓN DE FUGAS	-
REVISIÓN DE SISTEMA NEUMATICO Y FILTROS	-

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

Funcionando con limitaciones, problema con el sevoflurano

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Juan C. Encarnación
CÉDULA: 1.C
FIRMA:

Cliente:

NOMBRE:
CÉDULA:
FIRMA:





Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 3008

DATOS GENERALES			
INSTITUCION HOSPITAL DR TEOFILO HERNANDEZ		EQUIPO EM-144 MONITOR DE GASES ANESTESICOS	
UBICACION	ESTE	CODIGO	1,239
PROVINCIA	EL SEIBO	MARCA	NORTHERN
FECHA DE VISITA	08/08/2024	MODELO	VIRGO
UBICACION DEL EQUIPO	B. Q. / QUIROFANOS ZONA D (2)	SERIAL	JH20220426005
NOTIFICACION VIA	Whastapp		
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: mp			

DIAGNOSTICO INICIAL

Mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL	-
PRUEBA DE SENSORES	-
CHEQUEO DEL FUNCIONAMIENTO DE ELECTRODOS Y CABLES DE CONEXIÓN	-

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

Funcionando Correctamente

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Juan C Galarraga
CÉDULA: _____
FIRMA: *Juan C Galarraga*
SELLO: _____

Cliente: *[Signature]*
NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA: _____
SELLO: _____

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net



Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 3010

DATOS GENERALES			
INSTITUCION HOSPITAL DR TEOFILO HERNANDEZ		EQUIPO EM-134 MESA PARA CIRUGÍA GENERAL	
UBICACION	ESTE	CODIGO	560
PROVINCIA	EL SEIBO	MARCA	SAIKANG
FECHA DE VISITA	08/08/2024	MODELO	A202
UBICACION DEL EQUIPO	B. Q. / QUIROFANOS ZONA D (2)	SERIAL	A202-MCG-002
NOTIFICACION VIA	Whastapp		
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: mp			

DIAGNOSTICO INICIAL

Mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS

REVISION Y AJUSTE DEL SISTEMA HIDRAULICO	-
REVISION DE CONTROLES	-
ENGRASE Y LUBRICACION DE PARTES MECANICAS	-
MANTENIMIENTO EN GENERAL	-

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

Funcionando correctamente

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Juan Carlos Cruz
CÉDULA:
FIRMA: JC
SELLO:

Cliente:

NOMBRE:
CÉDULA:
FIRMA:
SELLO:

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net

Group Z Healthcare Products Dominicana



Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 3009

DATOS GENERALES			
INSTITUCION HOSPITAL DR TEOFILO HERNANDEZ		EQUIPO EM-148 MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO	
UBICACION	ESTE	CODIGO	1,240
PROVINCIA	EL SEIBO	MARCA	NORTHERN
FECHA DE VISITA	08/08/2024	MODELO	VENUS
UBICACION DEL EQUIPO	B. Q. / QUIROFANOS ZONA D (2)	SERIAL	JH20230331052
NOTIFICACION VIA	Whastapp		
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: mp			

DIAGNOSTICO INICIAL

Mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS

REVISION DE CIRCUITOS INTERNOS	-
AJUSTE DE CONFIGURACIONES	-
REVISION DE CABLES DE PARAMETROS	-
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	-
REVISION DE BATERIA	-

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

Funcionando Correctamente

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Juan C. Encarnacion
CÉDULA: _____
FIRMA: JC
SELLO: _____

Cliente:

NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA: _____
SELLO: _____

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net

Departamento de Biomedica
RNC 130530580



Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 3007

DATOS GENERALES			
INSTITUCION HOSPITAL DR TEOFILO HERNANDEZ		EQUIPO EM-016 ASPIRADOR PORTATIL	
UBICACION	ESTE	CODIGO	1,174
PROVINCIA	EL SEIBO	MARCA	KELING
FECHA DE VISITA	08/08/2024	MODELO	DFX-23C.III
UBICACION DEL EQUIPO	B. Q. / QUIROFANOS ZONA D (2)	SERIAL	300806222835
NOTIFICACION VIA	Whastapp		
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: mp			

DIAGNOSTICO INICIAL

Mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	-
REVISION DE FILTRO DE CONTROL DE HUMEDAD	-
LIMPIEZA GENERAL	-
REVISION DE MANGUERA	-

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

Funcionando Correctamente

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Juan C. Encarnación
CÉDULA: _____
FIRMA: J.C.
SELLO: _____

Cliente:

NOMBRE:
CÉDULA: _____
FIRMA: _____
SELLO: _____

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net

Group Z Healthcare Products Dominicana



Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 2997

DATOS GENERALES			
INSTITUCION	HOSPITAL DR TEOFILO HERNANDEZ	EQUIPO	EM-146 MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO FIJO
UBICACION	ESTE	CODIGO	1,145
PROVINCIA	EL SEIBO	MARCA	BIOCARE
FECHA DE VISITA	08/08/2024	MODELO	IM12
UBICACION DEL EQUIPO	B. Q. / POST QUIRÚRGICO NO. 1	SERIAL	C321010118 C321010146
NOTIFICACION VIA	Whastapp		
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: mp			

DIAGNOSTICO INICIAL

Mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS

REVISION DE CIRCUITOS INTERNOS	✓
AJUSTE DE CONFIGURACIONES	✓
REVISION DE CABLES DE PARAMETROS	✓
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO	✓
REVISION DE BATERIA	✓
LIMPIEZA EN GENERAL	✓

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

C321010118 Presenta Rayos en la pantalla (líneas vertical y horizontal)

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Juan C Encarnación
CÉDULA: _____
FIRMA: JC
SELLO: _____

Cliente:

NOMBRE: [Firma]
CÉDULA: _____
FIRMA: _____
SELLO: _____

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net

Departamento de Biomedica
RNC 130936536



Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana.
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 2998

DATOS GENERALES			
INSTITUCION	HOSPITAL DR TEOFILO HERNANDEZ	EQUIPO	EM-146 MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO FIJO
UBICACION	ESTE	CODIGO	1,145
PROVINCIA	EL SEIBO	MARCA	BIOCARE
FECHA DE VISITA	08/08/2024	MODELO	IM12
UBICACION DEL EQUIPO	B. Q. / POST QUIRÚRGICO NO. 2	SERIAL	C321010110 C321010119
NOTIFICACION VIA	Whastapp		
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:	mp		

DIAGNOSTICO INICIAL

Mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS

REVISION DE CIRCUITOS INTERNOS	-
AJUSTE DE CONFIGURACIONES	-
REVISION DE CABLES DE PARAMETROS	-
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO	-
REVISION DE BATERIA	-
LIMPIEZA EN GENERAL	-

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Juan C. Caceres
CÉDULA: _____
FIRMA: JC
SELLO: _____

Cliente:

NOMBRE: [Firma]
CÉDULA: _____
FIRMA: _____
SELLO: _____

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net

Group Z Healthcare Products Dominicana
Departamento de Biomedica
RNC 130436536



Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 2994

DATOS GENERALES

INSTITUCION	HOSPITAL DR TEOFILO HERNANDEZ		EQUIPO	EM-150 NEBULIZADOR ADULTO PEDIATRICO GRADO HOSPITALARIO
UBICACION	ESTE	CODIGO	1,142	
PROVINCIA	EL SEIBO	MARCA	DAVID MEDICAL	
FECHA DE VISITA	08/08/2024	MODELO	AC-200B+KY-10B	
UBICACION DEL EQUIPO	B. Q. / E. DE ENF. INTERNAMIEN	SERIAL	A63BAKD01038 A63BAKD01036	
NOTIFICACION VIA	Whastapp			
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía			
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: mp				

DIAGNOSTICO INICIAL

Mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS

REVISIÓN Y CHEQUEO DE FUNCIONAMIENTO ELECTRICO
REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MASCARILLA

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Juan Carlos
CÉDULA: _____
FIRMA: Juan Carlos
SELLO: _____

Cliente:

NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA: _____
SELLO: _____

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net

Departamento de Biomédica
RNC 130936536



Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 2995

DATOS GENERALES

INSTITUCION HOSPITAL DR TEOFILO HERNANDEZ		EQUIPO EM-066 ELECTROCARDIOGRAFO 12 DERIVACIONES CON CARRO DE TRANSPORTE	
UBICACION	ESTE	CODIGO	724
PROVINCIA	EL SEIBO	MARCA	BIOCARE
FECHA DE VISITA	08/08/2024	MODELO	IE 12A
UBICACION DEL EQUIPO	B. Q. / E. DE ENF. INTERNAMIEN	SERIAL	I422050540
NOTIFICACION VIA	Whastapp		
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: mp			

DIAGNOSTICO INICIAL
Mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS	
REVISION Y CHEQUEO DE CABLE DE PACIENTE	-
AJUSTE DE CONFIGURACIONES	-
AJUSTE DE TORNILLOS Y PIEZAS DEL EQUIPO	-
REVISION DE PRINTER Y BATERIA	-

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

Personal Técnico GZ Health:
NOMBRE: Juan Carlos
CÉDULA:
FIRMA:
SELLO:

Cliente:
NOMBRE:
CÉDULA:
FIRMA:
SELLO:

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net

Departamento de Biomedica
RNC 130936536



Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
 Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
 Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 3006

DATOS GENERALES

INSTITUCION HOSPITAL DR TEOFILO HERNANDEZ		EQUIPO EM-202 TORRE LAPAROSCOPIA	
UBICACION	ESTE	CODIGO	1,238
PROVINCIA	EL SEIBO	MARCA	CYMO
FECHA DE VISITA	08/08/2024	MODELO	6698
UBICACION DEL EQUIPO	B. Q. / QUIROFANOS ZONA D (2)	SERIAL	Cabezal Cámara: SN-8806035 / Monitor:SN-D26921490021 / Procesador de Video: SN-669812015225 / Fuente de Luz:SN-710001012921 / Insuflador CO2:SN-DF2 2241145 / Adaptador óptico: SN-1332V0080 / Mouse óptico:SN-Y22030462 / Fibra óptica:SN-94/9710 y SN-94/9703 / Laparoscopio 4K:SN-1765560 / Laparoscopio 4K: SN-1750519 Teclado: SN-Y2101880060871 Video Grabadora Digital: VGD-20X0005
NOTIFICACION VIA	Whastapp		
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: mp			
DIAGNOSTICO INICIAL			
Mantenimiento Preventivo Programado			

TRABAJOS REALIZADOS

REVISION DE FUNCIONAMIENTO	-
REVISION DE BOMBILLA	-
LIMPIEZA DE VENTILADORES	-
CONFIGURACION Y CALIBRACION DEL SISTEMA	-
MANTENIMIENTO EN GENERAL	-

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Juan Carlos
 CÉDULA: _____
 FIRMA: Juan C. E.
 SELLO: _____

Cliente:

NOMBRE: _____
 CÉDULA: _____
 FIRMA: _____
 SELLO: _____

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net

Group Z HealthCare Products Dominicana

Departamento de Biomedica
 RNC 130936536



Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 3003

DATOS GENERALES			
INSTITUCION	HOSPITAL DR TEOFILO HERNANDEZ	EQUIPO	EM-134 MESA PARA CIRUGÍA GENERAL
UBICACION	ESTE	CODIGO	560
PROVINCIA	EL SEIBO	MARCA	SAIKANG
FECHA DE VISITA	08/08/2024	MODELO	A202
UBICACION DEL EQUIPO	B. Q. / QUIROFANOS ZONA D (1)	SERIAL	A202-MCG-001
NOTIFICACION VIA	Whastapp		
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: mp			

DIAGNOSTICO INICIAL

Mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS

REVISION Y AJUSTE DEL SISTEMA HIDRAULICO	-
REVISION DE CONTROLES	-
ENGRASE Y LUBRICACION DE PARTES MECANICAS	-
MANTENIMIENTO EN GENERAL	-
	-
	-
	-
	-

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Juan Carlos
CÉDULA: _____
FIRMA: Juan C. E.
SELLO: _____

Cliente:

NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA: _____
SELLO: _____

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net

Group Z HealthCare Products Dominicana

Departamento de Biomédica
RNC 130936536



Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 2991

DATOS GENERALES

INSTITUCION	HOSPITAL DR TEOFILO HERNANDEZ		EQUIPO	EM-058 DESFIBRILADOR BIFASICO
UBICACION	ESTE	CODIGO	842	
PROVINCIA	EL SEIBO	MARCA	COMEN	
FECHA DE VISITA	08/08/2024	MODELO	S8	
UBICACION DEL EQUIPO	B. Q. / E. DE ENF. INTERNAMIEN		SERIAL	S8210617003
NOTIFICACION VIA	Whastapp			
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía			
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: mp				

DIAGNOSTICO INICIAL

Mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL	-
AJUSTE DE CONFIGURACIONES	-
REVISION DE CIRCUITOS ELECTRICOS	-
CHEQUEO DEL FUNCIONAMIENTO DE PALETAS Y CABLES DE CONEXIÓN	-

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

Personal Técnico GZ Health:


NOMBRE: Ben C Encarnación
CÉDULA: _____
FIRMA: *BC*
SELLO: _____

Cliente:

NOMBRE: _____
CÉDULA: _____
FIRMA: _____
SELLO: _____

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net

Departamento de Biomédica
RNC 130936536

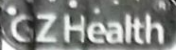

Group Z Healthcare Products Dominicana S.R.L.
 Calle Primera, Sector Invi Cea, Boca Chica, Santo Domingo República Dominicana,
 Teléfono 809-638-8760, RNC 1-30-93653-6

REPORTE DE VISITA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº.: 2993

DATOS GENERALES			
INSTITUCION HOSPITAL DR TEOFILO HERNANDEZ		EQUIPO EM-147 MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO PORTATIL	
UBICACION	ESTE	CODIGO	1,145
PROVINCIA	EL SEIBO	MARCA	BIOCARE
FECHA DE VISITA	08/08/2024	MODELO	IM12
UBICACION DEL EQUIPO	B. Q. / E. DE ENF. INTERNAMIEN	SERIAL	C321010124 C321010152 C321010113
NOTIFICACION VIA	Whastapp		
SERVICIO BRINDADO POR	Garantía		
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: mp			

DIAGNOSTICO INICIAL

Mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS

REVISION DE CIRCUITOS INTERNOS	-
AJUSTE DE CONFIGURACIONES	-
REVISION DE CABLES DE PARAMETROS	-
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO	-
REVISION DE BATERIA	-
LIMPIEZA EN GENERAL	-
	-
	-

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPUESTOS UTILIZADOS	CANTIDAD	SERIAL	DESCRIPCION

OBSERVACIONES FINALES

Personal Técnico GZ Health:

NOMBRE: Juan Carlos
 CÉDULA: _____
 FIRMA: Juan C
 SELLO: _____

Cliente:

NOMBRE: _____
 CÉDULA: _____
 FIRMA: _____
 SELLO: _____

Para mayor información, contactar al Servicio Técnico GZ Health: Telf: (809)638-8760 / correo: administ-biomedica@healthcc.net

Group Z Healthcare Products Dominicana
 Departamento de Biomedica
 RNC 130936536